

Die Heelift® Fersen-Freilagerungen in 3 Varianten für optimale Versorgung

Effektive Druckentlastung im Fersenbereich, speziell bei Liegendpatienten

Heelift®



- > Das Originalmodell ist ein ideales und kosteneffektives Hilfsmittel für Fersen-Freilagerungen und Druckentlastung

HiMi-Nr. Standard: 11.11.05.0002
Smooth: 11.11.05.0003

Heelift® Glide



- > Die Premiumversion des Heelifts® mit zusätzlichem Vorfußriemen für mehr Sicherheit und gleitendem Obermaterial

HiMi-Nr. Standard: 11.11.05.0002
Smooth: 11.11.05.0003

Heelift® AFO



- > Die verbesserte Version verbindet alle Features des Heelift® Glides mit einer halbstarren Schiene, die leichte Belastung zulässt

HiMi-Nr. 11.11.05.0020
(gilt für Standard und Smooth)


- > zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse sowie bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- > bei Diabetes mit neurologisch sensorischen Ausfallerscheinungen
- > bei länger anhaltender Immobilität oder Koma
- > individuelle Anpassung an jeden Patienten

Alle Modelle sind in zwei Oberflächenarten erhältlich: genoppt (Standard) oder glatt (Smooth)




DARCO

Warum ist der Heelift® die richtige Versorgung für den Patienten?

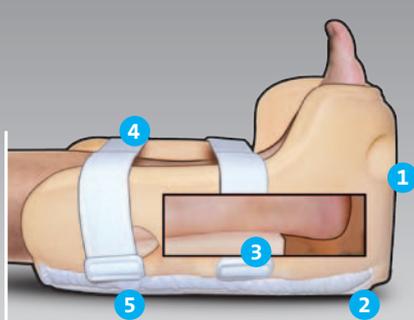


Alle Heelift® Modelle

- 1 **Belüftungsöffnungen** fördern die Luftzirkulation für mehr Komfort.
- 2 **Fersenentlastungsöffnung** ermöglicht eine visuelle Beurteilung der Ferse.
- 3 **Befestigtes Schaumstoffpolster** hebt das Bein, entlastet die Ferse für optimale Heilung eines Fersenulcus.
- 4 **Weiche Schnellverschlussriemen** für individuelle Passgenauigkeit.
- 5 **Reibungsfreie Auflage** erleichtert Bewegungen für mehr Patientensicherheit.

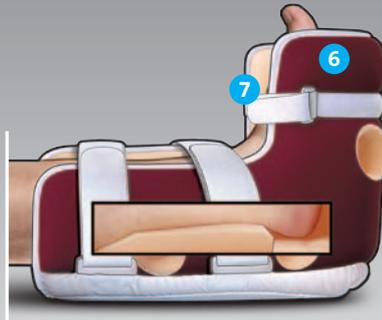

Heelift® Glide

- 6 **Glatte Außenseite** ermöglicht ein leichtes Gleiten des Beines über das Bettlaken.
- 7 **Vorfußriemen** fixiert den Fuß und trägt zur Stützung des Vorfußes bei.

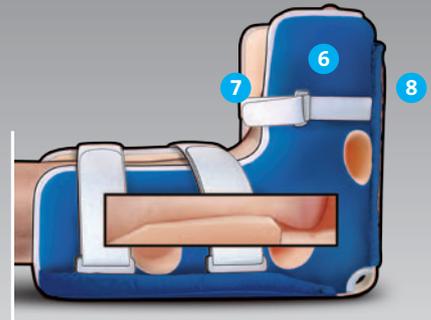

Heelift® AFO

- 6 **Glatte Außenseite** ermöglicht ein leichtes Gleiten des Beines über das Bettlaken.
- 7 **Vorfußriemen** fixiert den Fuß und trägt zur Stützung des Vorfußes bei.
- 8 **Halbstarre Schiene** ist bedingt flexibel, bietet jedoch optimale Kontrolle der Stellung und Beweglichkeit des Fußgelenks.

Wahl der Schaumstoffoberfläche



Der **glatte Schaumstoff** wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt. Einer Ödembildung wird so entgegengewirkt. Empfehlenswert für Diabetespatienten.

Durch die spezielle Schaumstoffkonstruktion bei der **genoppten Version** entsteht eine bessere Luftzirkulation. Die Noppen sorgen für einen angenehmen Kühleffekt.

Art.-Nr. Größe (Wadenumfang)

Heelift®

Standard (genoppte Oberfläche)
DM-HLP Petite (15 – 25 cm)
DM-HL Normal (20 – 36 cm)

Smooth (glatte Oberfläche)
DM-HLSP Petite (15 – 25 cm)
DM-HLS Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSB Bariatric (30 – 58 cm)
Farbe: Beige

Heelift® Glide

Standard (genoppte Oberfläche)
DM-HLPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLG Normal (20 – 36 cm)

Smooth (glatte Oberfläche)
DM-HLSPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLSG Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSBG Bariatric (30 – 58 cm)
Farbe: Rot

Heelift® AFO

Standard (genoppte Oberfläche)
DM-HL-AFO Universal (20 – 36 cm)

Smooth (glatte Oberfläche)
DM-HLS-AFO Universal (20 – 36 cm)
Farbe: Blau

Alle Heelift® Modelle sind rechts und links anlegbar und können im mitgelieferten Wäschebeutel bei 50°C gewaschen oder im Autoklav sterilisiert werden.

